

サクラ酵素洗淨剤・浸漬用

サクラザイム

浸漬洗淨に最適な配合で効果的な洗淨を実現。
泡の発生を抑え、すすぎもしやすくなり環境にも配慮しました。



- 洗淨力がアップし
汚れが落ちやすくなりました。
- 発泡を抑えて
すすぎがしやすくなりました。
- 1L容器で持ちやすくなりました。



サクラ精機

サクラ酵素洗剤・浸漬用


サクラザイム



安心の洗浄力で洗浄業務をサポート

洗浄剤	洗浄剤濃度	洗浄時間 (分)		
		5分	10分	15分
サクラザイム	0.25%			
		24%	44%	100%
サクラザイム	0.50%			
		28%	82%	100%
製品 A	0.25%			
		20%	20%	24%
製品 A	0.50%			
		14%	21%	27%

評価方法
TOSIを規定時間静置浸漬させソイル除去状態から洗浄率(%)を算出。
洗浄温度：40℃
※洗浄率(%)の算出方法
(洗浄前のソイル面積 - 洗浄後のソイル面積) ÷ 洗浄前のソイル面積 × 100

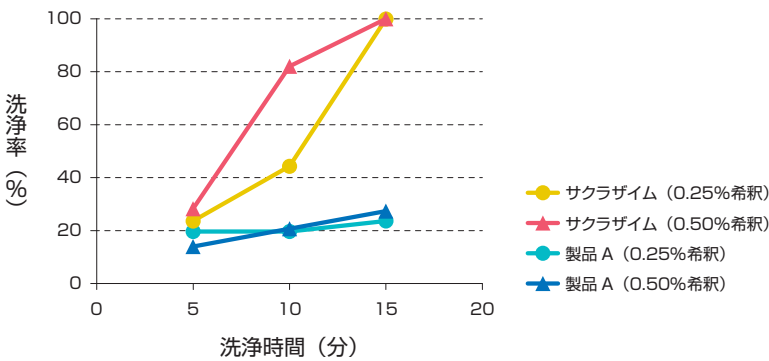

泡の発生を抑えました

	静置時間		
	1分	5分	10分
サクラザイム 製品A			
製品 A			

評価方法
濃度 1.0%、液温 40℃の各洗浄液 50mL を 100ml 比色管に注入し、30 秒間上下に振ったあと静置させ一定時間経過後の消泡状態を観察。

商品名	サクラザイム	
内容量	1L (約 1.1Kg)	4.5L (約 5.1Kg)
入数	4本	4本
液性	弱アルカリ性 pH9.0 (原液)	
主成分	界面活性剤、蛋白質分解酵素 金属腐食防止剤 など	
使用濃度	0.25 ~ 1.0%	
型式	SD-240	SD-250

ご注意

- 洗浄後は十分すすぎを行ってください。
- スプレーでの使用は避けてください。
- 金属または樹脂の種類によって変質する場合がありますので予め試験をしてからご使用ください。
- 使用時にはゴーグル・手袋・マスクを着用し、使用方法及び使用上の注意を確認してからご使用ください。



※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

発売元 サクラ精機株式会社

感染制御事業本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-12
新川フロンティアビル
☎03-3553-8034 FAX. 03-3553-8072

フリーダイヤル 0120-037-311
ホームページ <http://www.sakurajp.com>